

NewClassic ML

Разумный выбор

Швейцарское качество взвешивания

**Точные результаты, удобство в работе и компактная конструкция:
Базовые модели весов серии NewClassic ML – ваши надежные помощники.**

Впервые компания МЕТТЛЕР ТОЛЕДО внедрила в портативные весы проверенную временем и надежную технологию взвешивания MonoBloc – чтобы вы всегда могли получать самые точные результаты. Для дополнительной надежности всего одним нажатием кнопки можно выполнить калибровку с использованием встроенной калибровочной гири. Обтекаемая и гладкая конструкция весов облегчает их чистку, а эксплуатация очень проста благодаря интуитивно понятному меню и яркому экрану.

**Весы NewClassic ML – это швейцарская точность в действии
и лучший выбор в любой ситуации.**

Точные результаты




Каждый экземпляр весов МЕТТЛЕР ТОЛЕДО сделан так, чтобы обеспечить получение самых точных и воспроизводимых результатов.

Компактность и портативность



Все модели весов серии NewClassic ML могут работать с питанием от аккумуляторной батареи и от сети переменного тока, позволяя использовать все режимы взвешивания и получать точные результаты в любых условиях.

Долговечная конструкция

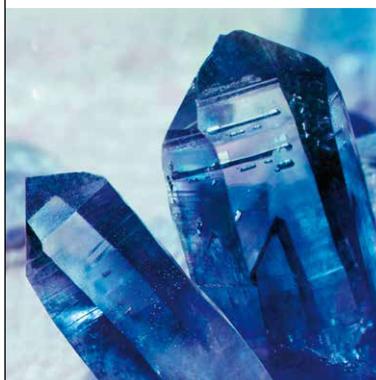

Металлический корпус защищает весовой датчик от влияния окружающей среды, гарантируя стабильность и точность показаний в течение многих лет.



ML

METTLER TOLEDO

58.7298 g

100

+

ON/OFF

→0/T←

Mode

1e

METTLER TOLEDO

Компактные весы

Широкие возможности

Компактные весы модели NewClassic ML отличаются широким диапазоном применений и представляют собой универсальное решение, дающее точные результаты в лаборатории, на складе и даже в полевых условиях. Удобный интуитивный интерфейс упрощает работу во всех режимах взвешивания:

- Быстрое определение количества предметов в режиме счета штук: число гвоздей, болтов, таблеток и даже бумажных листов и конвертов
- Контроль образцов по заданной номинальной массе в режиме контрольного взвешивания
- Вызов на экран последнего установленного значения массы – для повышения надежности обработки данных
- Расчет объема жидкостей в режиме взвешивания с умножением на произвольный коэффициент
- Анализ данных взвешивания с использованием функций статистики
- Регистрация даты и времени для обеспечения прослеживаемости

Откройте для себя все преимущества режимов процентного взвешивания, динамического взвешивания, составления рецептур и суммирования.

Отличительные особенности:



Надежный ячеки MonoBloc

обеспечивают высокую скорость и точность взвешивания (в зависимости от модели весов)



Встроенная аккумуляторная батарея

Восемь часов работы в автономном режиме



Защита от перегрузки

в случае превышения максимально допустимой нагрузки



Калибровка по нажатию кнопки с помощью встроенной гири (в зависимости от модели)



Защитный чехол

Полностью закрывает весы, защищая их от загрязнения и царапин



Возможности подключения

Интерфейс RS232 для подключения к принтеру или ПК. Дополнительное ПО не требуется



Диагностика

Удобные средства диагностики весов, например проверка клавиатуры, контроль воспроизводимости



МОЗМ Все модели могут поставляться в сертифицированных модификациях



Режимы взвешивания

Счет штук, процентное взвешивание, контрольное взвешивание, динамическое взвешивание, определение плотности, составление рецептур, суммирование, статистика, умножение на коэффициент



METTLER TOLEDO

Преимущества NewClassic ML

Преимущества



МоноБлок и встроенная калибровочная гиря

Калибровка весов со встроенной калибровочной гирей выполняется одним нажатием клавиши. Весовая ячейка MonoBloc обеспечивает высокую точность и достоверность результатов, а также длительный срок службы весов.



Прямое подключение

Интерфейс RS232 позволяет подключить весы непосредственно к ПК и передавать результаты взвешивания в ПО с открытым форматом данных, например в таблицы Excel. Передача данных выполняется автоматически без какого-либо дополнительного ПО.



Экран с яркой подсветкой

Экран с яркой подсветкой позволяет без труда считывать информацию даже в самых неблагоприятных условиях освещенности.

Широкая область применения



Контроль номинальной массы

Режим контроля отклонений от номинальной массы.



Управление запасами

Быстрое определение количества предметов с помощью весов.




Автономная работа

Встроенная аккумуляторная батарея позволяет производить взвешивание даже в полевых условиях.



Весы NewClassic ML

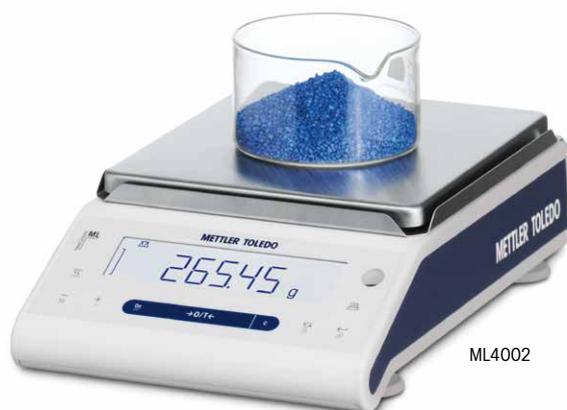

ML4002

Калибровка встроенными гирями


Модель	НПВ	Дискретность	Воспроизводи- мость	Нелиней- ность	Грузоприем- ная чаша (мм)	Габаритные размеры весов мм (Ш x Г x В)
ML54	52 г	0,1 мг	0,1 мг	0,2 мг	Ø 90	193x290x331
ML104	120 г	0,1 мг	0,1 мг	0,2 мг	Ø 90	193x290x331
ML204	220 г	0,1 мг	0,1 мг	0,2 мг	Ø 90	193x290x331
ML203	220 г	0,001 г	0,001 г	0,002 г	Ø 120	193x290x331
ML303	320 г	0,001 г	0,001 г	0,002 г	Ø 120	193x290x331
ML503	520 г	0,001 г	0,001 г	0,002 г	Ø 120	193x290x331
ML802	820 г	0,01 г	0,01 г	0,02 г	170x190	184x290x84
ML1602	1620 г	0,01 г	0,01 г	0,02 г	170x190	184x290x84
ML3002	3200 г	0,01 г	0,01 г	0,02 г	170x190	184x290x84
ML4002	4200 г	0,01 г	0,01 г	0,02 г	170x190	184x290x84
ML6002	6200 г	0,01 г	0,01 г	0,02 г	170x190	184x290x84
ML2001	2200 г	0,1 г	0,1 г	0,2 г	170x190	184x290x84
ML4001	4200 г	0,1 г	0,1 г	0,2 г	170x190	184x290x84
ML6001	6200 г	0,1 г	0,1 г	0,2 г	170x190	184x290x84



Калибровка внешними гирями

Модель	НПВ	Дискретность	Воспроизводи- мость	Нелиней- ность	Грузоприем- ная чаша (мм)	Габаритные размеры весов мм (Ш x Г x В)
ML203E	220 г	0,001 г	0,001 г	0,002 г	Ø 120	184x290x188
ML303E	320 г	0,001 г	0,001 г	0,002 г	Ø 120	184x290x188
ML802E	820 г	0,01 г	0,01 г	0,02 г	Ø 160	184x290x84
ML1502E	1520 г	0,01 г	0,01 г	0,02 г	Ø 160	184x290x84
ML3002E	3200 г	0,01 г	0,01 г	0,02 г	170x190	184x290x84
ML4002E	4200 г	0,01 г	0,01 г	0,02 г	170x190	184x290x84
ML6001E	6200 г	0,1 г	0,1 г	0,2 г	Ø 160	184x290x84



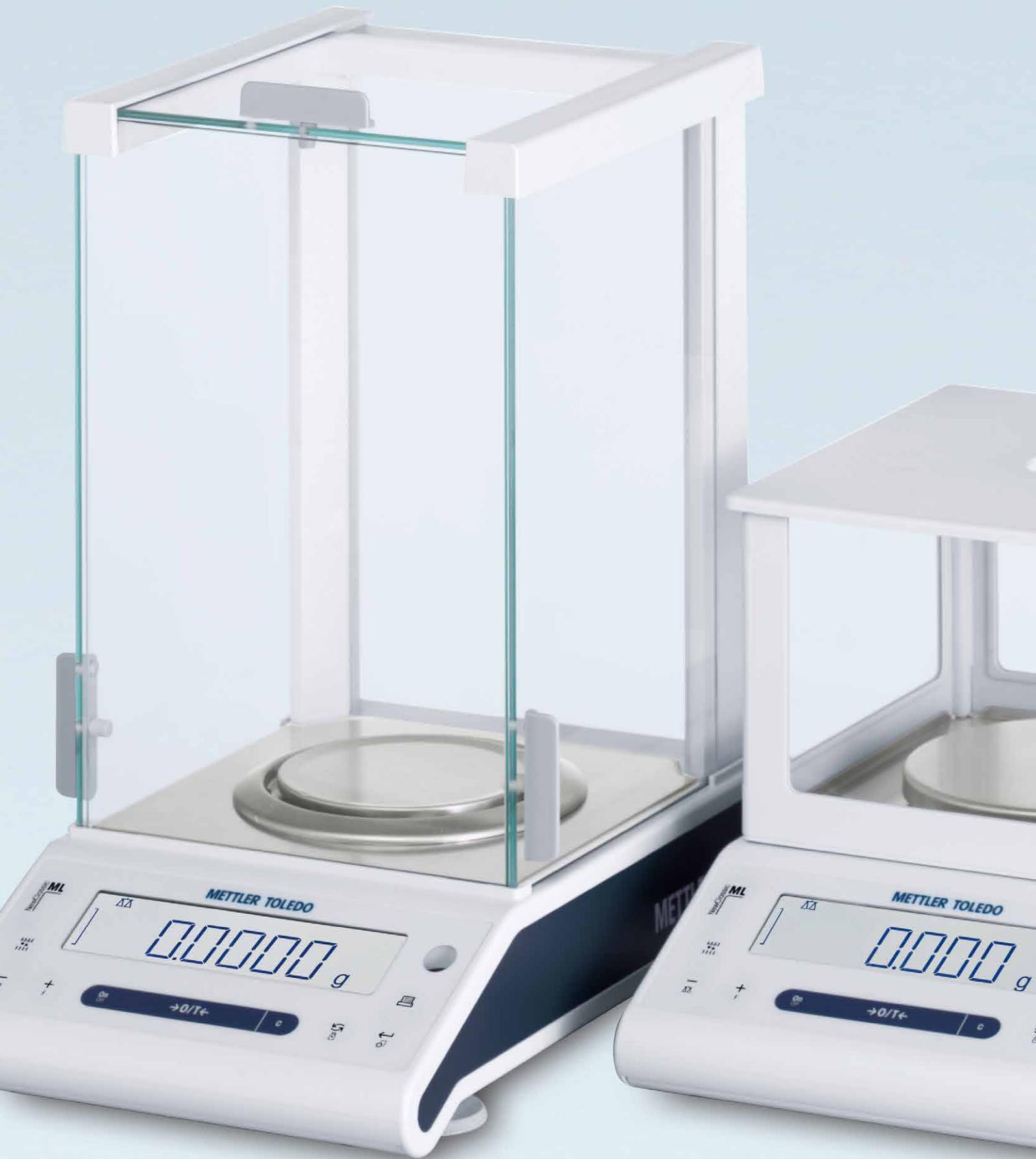



**КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ЛАБОРАТОРИЙ РАЗЛИЧНОГО
ПРОФИЛЯ**

**ВАШ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК
В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ**

Россия, 603057
Нижний Новгород
пр. Гагарина, 25 Б, офис 58
Тел./факс: (831) 412 19 51
Тел./факс: (831) 412 09 52
Тел.: (831) 465 95 12
e-mail: alterlab@alterlabnn.ru
www.alterlabnn.ru

Дополнительная информация:

► www.mt.com/newclassic-ml